


# Шейкеры для CO<sub>2</sub>-инкубаторов BINDER

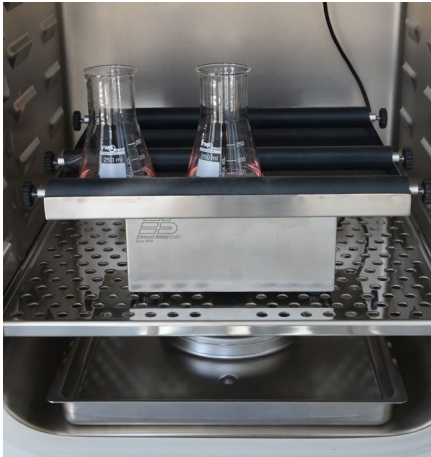

Шейкер в CO<sub>2</sub>-инкубаторе BINDER CB 160

CB 170 | CB 260 | CB-S 170 | CB-S 260

CO<sub>2</sub>-шейкер BINDER представляет собой новую высококачественную разработку для выращивания суспензионных клеточных культур в CO<sub>2</sub>-инкубаторах. Благодаря использованию устойчивых к коррозии компонентов в корпусе из нержавеющей стали CO<sub>2</sub>-шейкер рассчитан на инкубаторы с повышенной концентрацией CO<sub>2</sub> и высокой влажностью воздуха. За счет минимальной теплоотдачи, всего 4 Вт, шейкер не влияет на температуру, установленную в инкубаторе CB, что позволяет сохранять оптимальный микроклимат внутреннего пространства. Внешний блок управления со светодиодной индикацией дает возможность простого и удобного обслуживания снаружи инкубатора. Версия «Universal» подходит для всех CO<sub>2</sub>-инкубаторов без порта доступа; версия «Professional» предназначена для серии CB с портом доступа для подвода электропитания. Данное решение полностью исключает негерметичность и конденсацию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраивание:	горизонтальное круговое
Площадь встраивания (мм):	Ш 375 x Г 375
Макс. нагрузка:	2 кг
Число оборотов:	5–220 об/мин
Длина хода:	20 мм
Время работы:	1 с – 100 ч или в продолжительном режиме
Светодиодная индикация:	число оборотов и время работы
Допустимая концентрация CO <sub>2</sub> :	до 20 %
Допустимая влажность:	до 95 %, без конденсации
Температура окружающей среды:	4–45 °C
Электроподключение:	100–240 В, 50/60 Гц
Степень защиты:	IP 21
Теплоотдача:	макс. 4 Вт
Внешние размеры (мм):	Ш 375 x Г 375 x В 145
Фиксация проб:	3 прижимные планки
Вес:	9,1 кг

## ОСОБЕННОСТИ:

- Надежное решение, специально разработанное для CO<sub>2</sub>-инкубаторов BINDER
- Коррозиестойкие компоненты в корпусе из нержавеющей стали
- Низкая теплоотдача
- Внешний блок управления со светодиодной индикацией

### ШЕЙКЕР «UNIVERSAL»

Шейкер соединен с блоком управления плоским кабелем, универсальное применение

Арт.№ 8012-1771

### ШЕЙКЕР «PROFESSIONAL»

Шейкер и блок управления оснащены разъемами LEMO, специально для модели BINDER CB с портом доступа для подвода электропитания

Арт.№ 8012-1772



000 «Диазм»

Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

Новосибирск  
+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

Воронеж  
+7 (473) 232-4412  
vnn@dia-m.ru

Йошкар-Ола  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

Красноярск  
+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

Казань  
+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

Кемерово  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

Армения  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

