


IKA

designed to work perfectly

ДИАМ
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

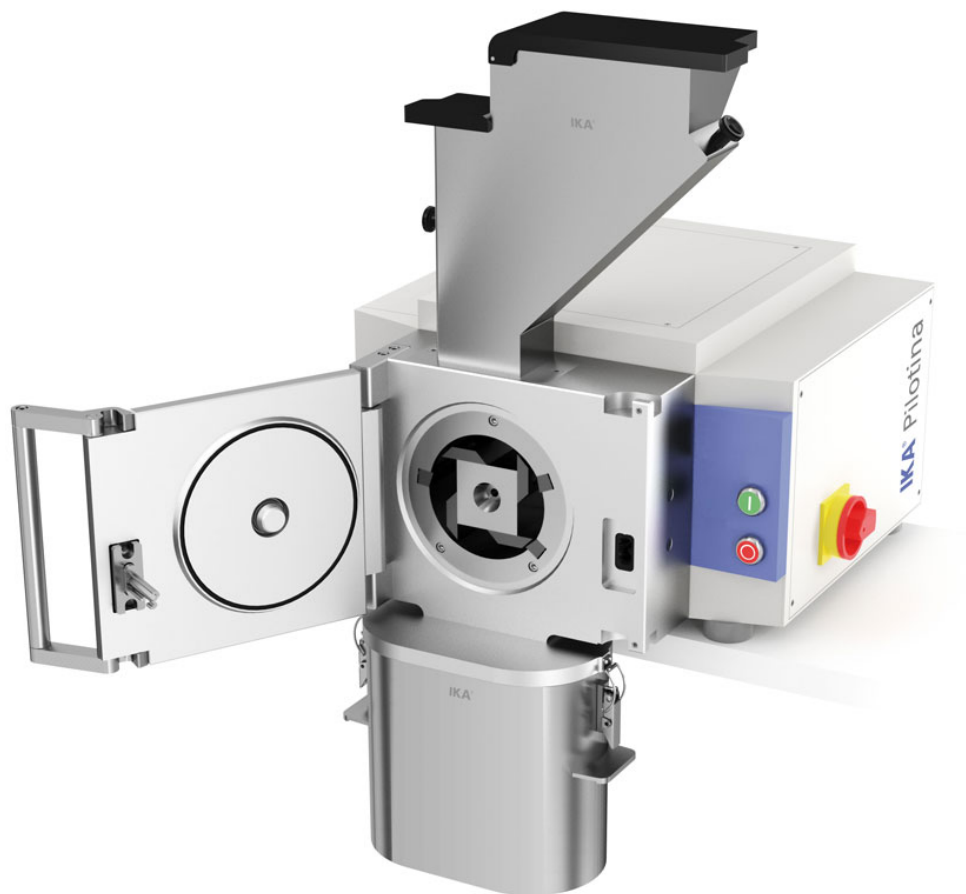

Pilotina MC

/// Технический паспорт

IKA Pilotina – это мельница для измельчения сухих продуктов в пилотных объемах, доступная в трех различных конфигурациях:

IKA Pilotina MC - мельница, основанная на режущем эффекте

Мельница IKA Pilotina MC – это идеальный выбор для измельчения мягких, вязких, эластичных и волокнистых материалов, таких, например, как растения, пластик, кормовые гранулы и многое другое.



designed to work perfectly

Конструкция гарантирует отличное качество измельчения, тонкость помола, точный размер конечных частиц, а также легкую и быструю очистку. Мощный 1,5 кВт привод делает Pilotina MC идеальной пилотной машиной. Двойной подшипник, расположенный в дверце камеры для измельчения, обеспечивает точность резки даже при высокой нагрузке.

IKA Pilotina MI - мельница, основанная на ударном эффекте

Мельница IKA Pilotina MI – это идеальный выбор для дробления твердых и хрупких материалов, таких как уголь, стекло, руда или семена.

Продукт быстро дробится благодаря конструкционным особенностям камеры для измельчения и высокой скорости вращения ударного ротора. Финишный размер частиц может быть отрегулирован размерами ячеек сита, которое вставляется в камеру помола. Высокое качество обработки внутренней поверхности мельницы облегчает чистку после размола.

IKA Pilotina MU - универсальная мельница

IKA Pilotina MU - это идеальное сочетание качеств мельниц MC и MI.

Если вы имеете разнообразные материалы, для измельчения которых требуются как режущая, так и ударная мельницы, IKA Pilotina MU будет наилучшим выбором.

Модульная конструкция мельницы MU позволяет легко и быстро поменять ударный ротор на режущий и наоборот. Преимущества при эксплуатации MU: одна машина, два принципа измельчения, без каких-либо компромиссов в отношении качества измельчения и финального результата. Благодаря мощному частотно-регулируемому приводу в 3 кВт с цифровым дисплеем, окружная скорость инструмента может регулироваться в соответствии с желаемым процессом измельчения (дробления).



designed to work perfectly

Технические данные

Motor power	1.5 kW
Rotational speed	1500 rpm
Throughput approx.	60 kg/h
Tip speed	9 m/s
Charging hardness, max.	3 Mohs
Charging size, max.	approx. 65 x 60 mm
Protection type	IP 55

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

